

デュアル光源システム

光源 2 台分の明るい光源システムです。


- 光源2台を使用して明るい光を照射
- 光源単体に比べ約2倍の光量アップ
- ロッドレンズによる均一照射も可能

入射側2分岐ライトガイドを使用して、2台の光源の光を1本のライトガイドに導くことで、明るい光量を得ることができます。




光量比較 ※参考値

・光源単体の光量

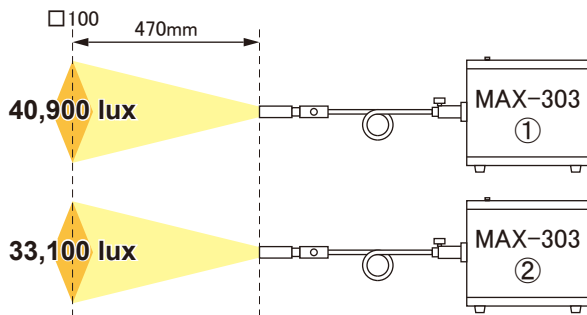


・入射側2分岐ライトガイド接続時の光量

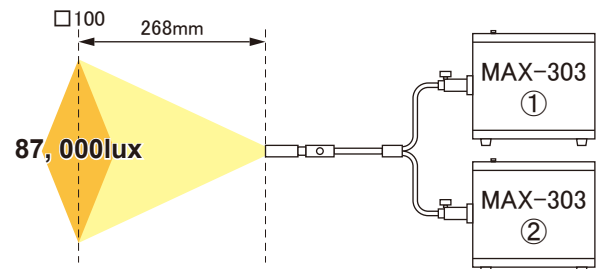

単体に比べて **約2倍** の光量アップ!

システム構成例

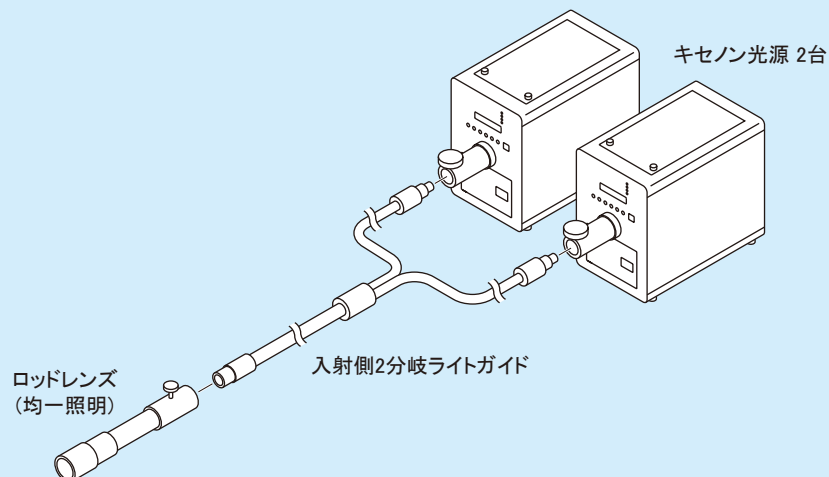

選択・オプションアクセサリ


■キセノン光源



MAX-303以外の機種でも対応できます。

	機種名	タイプ
100W	LAX-C100	UVB/UVA/VIS/IR
300W	MAX-303	UV/UV-VIS/VIS/IR

■ライトガイド

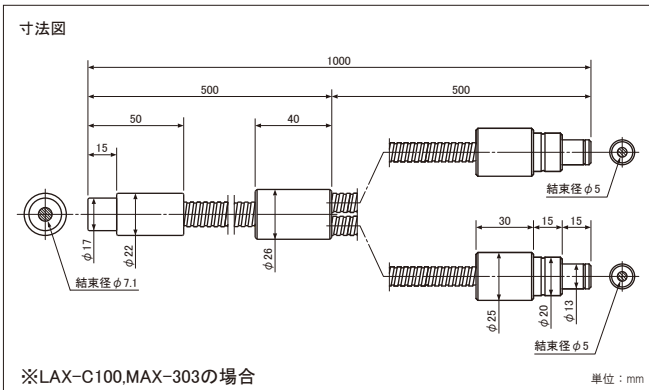



■ロッドレンズ (φ10用)



ライトガイドに取り付けて、出射光を照射むらの少ない均一な照明にすることができます。



1.0倍 RLQ-1 φ10

材質：石英

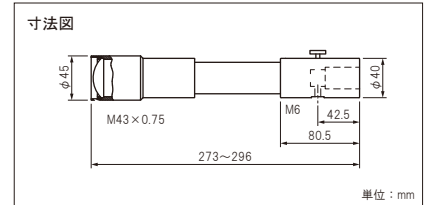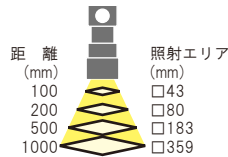

0.5倍 RLQ-05 φ10

材質：石英

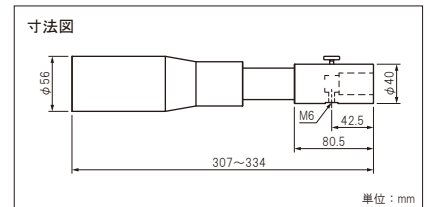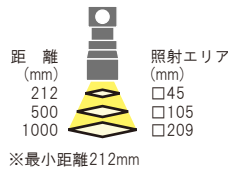

■本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co., Ltd.

朝日分光株式会社 <https://www.asahi-spectra.co.jp/>



国内営業部

本社 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F
TEL:03-3909-1151 FAX:03-3909-1152 E-mail:info@asahi-spectra.co.jp

栃木 〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
TEL:0287-37-4763 FAX:0287-37-4001 E-mail:info_tochigi@asahi-spectra.co.jp

大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
TEL:06-4807-1777 FAX:06-4807-1778 E-mail:info_osaka@asahi-spectra.co.jp