

## デュアル光源システム

光源 2 台分の明るい光源システムです。


- 光源2台を使用して明るい光を照射
- 光源単体に比べ約2倍の光量アップ
- ロッドレンズによる均一照射も可能

入射側2分岐ライトガイドを使用して、2台の光源の光を1本のライトガイドに導くことで、明るい光量を得ることができます。




### ■ 光量比較 (参考値)

・光源単体の光量

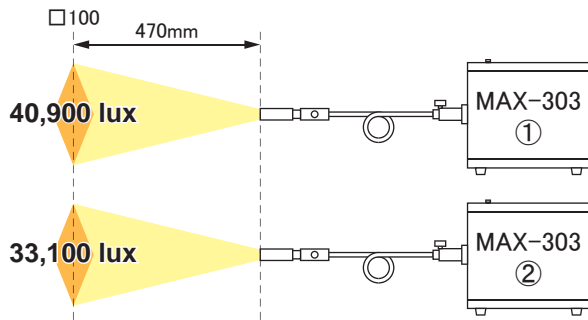


・入射側2分岐ライトガイド接続時の光量

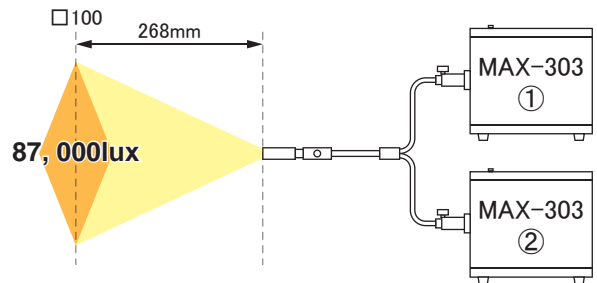

単体に比べて約2倍の光量アップ！

### ■ システム構成例

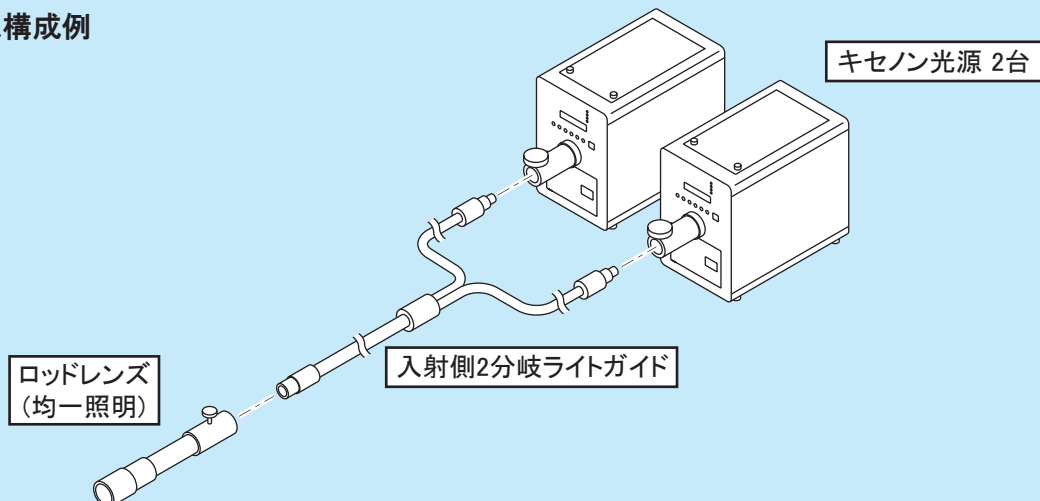

## ■キセノン光源




MAX-303以外の機種でも対応できます。

	機種名	タイプ
100W	LAX-C100	UVB/UVA/VIS/IR
100W	LAX-103	UVB/UVA/VIS/IR
300W	MAX-303	UV/UV-VIS/VIS/IR
1000W	LAX-1000	UV/VIS

## ■ライトガイド



<寸法図>

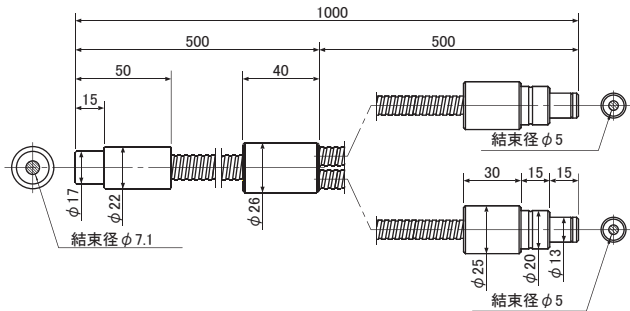

※LAX-C100/-103 MAX-303の場合の例


単位：mm

## ■ロッドレンズ (φ10用)




ライトガイドに取り付けて、出射光を照射むらの少ない均一な照明にすることができます。

サイズ：φ45×296mm  
※突起物を除く  
材質：石英

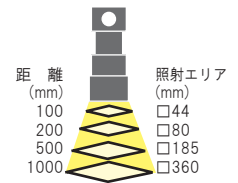

<寸法図>

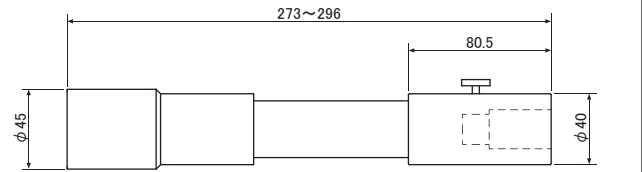

単位：mm

■本カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co.,Ltd.

## 朝日分光株式会社

本社/営業部 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル4F  
tel:03-3909-1151 fax:03-3909-1152 E-mail:info@asahi-spectra.co.jp

東日本営業所 〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576  
tel:0287-37-4763 fax:0287-37-4001 E-mail:info.tochigi@asahi-spectra.co.jp

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F  
tel:06-4807-1777 fax:06-4807-1778 E-mail:info.osaka@asahi-spectra.co.jp

ホームページ [www.asahi-spectra.co.jp](http://www.asahi-spectra.co.jp)