
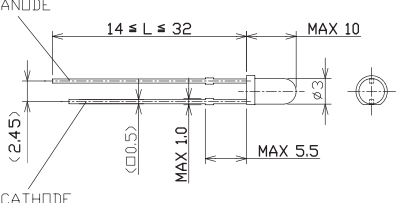

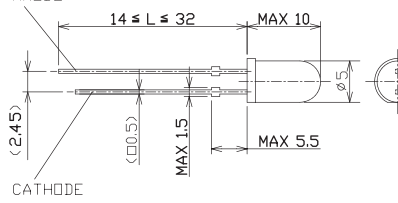
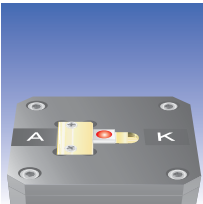
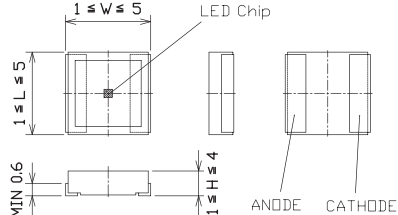

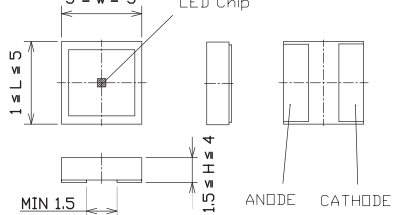
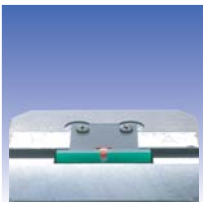
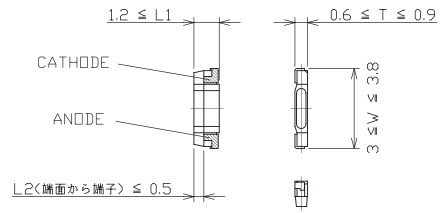

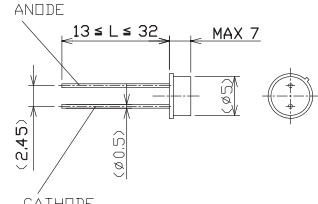
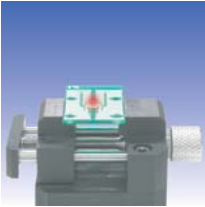
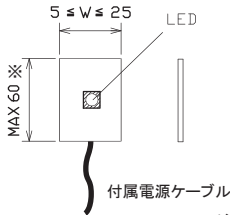

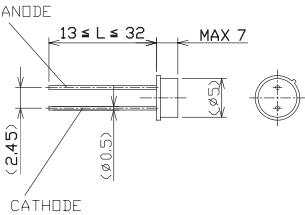
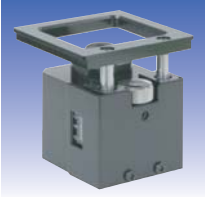
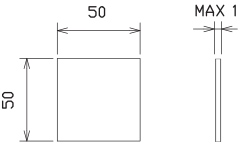
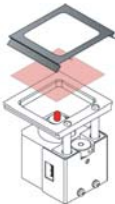


アタッチメント例

対象サンプル	アタッチメント	サンプル 寸法(mm) / 定格電流(AC) / 定格電圧(DC)
砲弾型LED	<p>砲弾型φ3タイプ 型番:UD0825</p>  <p>φ3mmの砲弾型LEDを取り付けることができます。</p>	 <p>1A 30V</p>
	<p>砲弾型φ5タイプ 型番:UD0826</p>  <p>φ5mmの砲弾型LEDを取り付けることができます。</p>	 <p>1A 30V</p>
表面実装型LED (SMD)	<p>サイドコンタクトタイプ 型番:UD0827</p>  <p>側面の両側に電極のあるLEDを取り付けることができます。</p>	 <p>1A 30V</p>
	<p>裏面電極タイプ 特注品 型番:UD0829</p>  <p>裏面に電極のあるLEDを取り付けることができます。エアーで吸着します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オプション ・真空ポンプ ・吸着アタッチメント用配管 	 <p>1A 30V</p>
サイドビューLED	<p>サイドビュータイプ 特注品 型番:UD0828</p>  <p>側面の片側に電極のあるLEDを取り付けることができます。</p>	 <p>1A 30V</p>
キャンタイプLED LEDチップ	<p>キャンタイプ(TO-08/-46) 型番:UD0847</p>  <p>TO-08/-46キャンタイプLEDを取り付けることができます。 LED素子は、キャンにボンディングして取り付けることができます。</p>	 <p>1A 30V</p>

対象サンプル	アタッチメント	サンプル 寸法(mm) / 定格電流(AC) / 定格電圧(DC)
基板実装したLED	基板クランプタイプ 型番:UD1029  基板に実装したLEDを取り付けることができます。基板をクランプで挟み込んで固定します。	 5 ≤ W ≤ 25 MAX 60 ※ LED 付属電源ケーブル ※LEDが基板の中心にある場合 1A 30V
ハイパワーLED	温度制御タイプ(TO-46) 特注品 型番:UD0890  ペルチェ冷却によりLEDの電極温度を一定に制御します。ハイパワーLEDの熱による温度依存の影響を抑えることができます。 ●オプション ・温調コントローラー	 ANODE 13 ≤ L ≤ 32 MAX 7 (2.45) (φ0.5) CATHODE 1A 30V
フィルム・シート	フィルム配光タイプ(砲弾型LED) 特注品 型番:UD1013  フィルム・シートの配光を測定するのに使用します。光源として砲弾型LEDを取り付けることができます。	 50 MAX 1 50 <取り付けイメージ> 

※上記以外にもサンプルに合わせて特注製造が可能です。詳しくはご相談願います。

■本カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Asahi Spectra Co.,Ltd.

朝日分光株式会社

本社／営業部 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーディアビル4F
 tel: 03-3909-1151 fax: 03-3909-1152

東日本営業所 〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
 tel: 0287-37-4763 fax: 0287-37-4001

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
 tel: 06-4807-1777 fax: 06-4807-1778

E-mail: info@asahi-spectra.co.jp ホームページ: www.asahi-spectra.co.jp